



1 CareKit Package Contents

Open your CareKit package and check that the contents are complete, unopened, and free from damage.

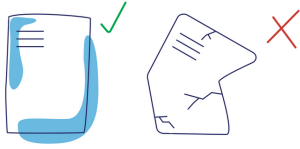

The contents will include:

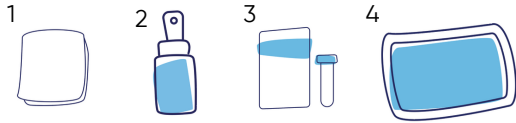

1) gauze sponge(s)
2) wound irrigation solution

3) collagen powder
4) protective composite dressing

2 Get Ready

Take one of each of the components from your CareKit package, and lay them out on a clean surface. Thoroughly wash hands with soap and water.




Note: Take care to ensure your hands are clean before interacting with the wound area in all steps moving forward.

3 Remove Old Dressing

Remove and discard any protective (outer) dressing covering the wound area.

NOTE: Do not forcibly remove any collagen remaining in the wound area.

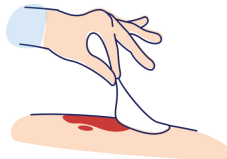

4 Cleanse


Spray the wound area with the wound irrigation solution until it is thoroughly cleansed. No rinse required. You may use a gauze sponge to help wipe up any excess collagen still in the area at this time.




5 Apply New Dressing

Open the pouch of collagen powder and apply directly to the wound area.

NOTE: Pinch the sides of the pouch to facilitate a more precise application on the wound. Sprinkle directly onto the area (~1/4 inch thick to the surface), ensuring it is not overly packed.

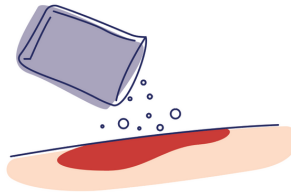


The wound irrigation solution from Step 4 may be sprayed to moisten the collagen before covering the wound in step 6.

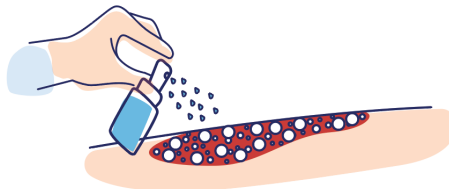


6 Cover & Protect

Use a gauze sponge to gently wipe up the excess collagen / moisture around the wound area.

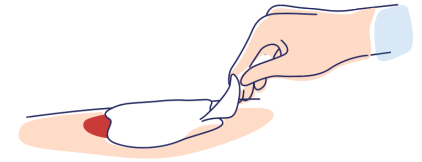

Cover the dressed wound area with the protective dressing, smoothing the edges to secure it in place. The adhesive border should not come in contact with the wound area.

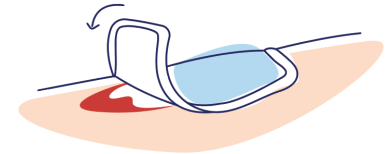

NOTE: To ensure a good seal, make sure the area around the wound is dry. If it is damp or wet, gently blot or wipe with gauze.

Need Help or Have Questions?


Call 1-888-656-3444 or
Email help@mirodx.com

Resources can be found at:
mirodx.com/patientresources-collagenpowder/




1 Contenido del Paquete CareKit

Abre tu paquete CareKit y verifica que los contenidos estén completos, sin abrir y sin daños.

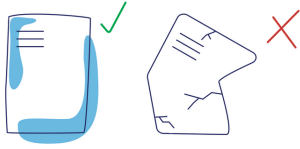

Los contenidos incluirán:

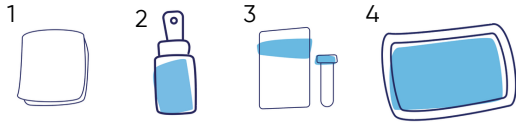

1) esponjas de gasa
2) solución limpiadora

3) polvo de colágeno,
4) apósito protector

2 Preparación.

Toma uno de cada uno de los componentes de tu paquete CareKit y colócalos sobre una superficie limpia. Lava bien las manos con agua y jabón.




Nota: asegúrate de que tus manos estén limpias antes de interactuar con el área de la herida en todos los pasos siguientes.

3 Quitar el vendaje antiguo

Retira y desecha cualquier apósito protector (externo) que cubra el área de la herida.

NOTA: No retire a la fuerza ninguna lámina de colágeno que quede en el área de la herida.

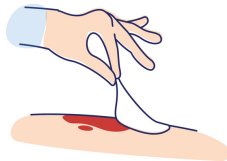

4 Limpieza


Rocía el área de la herida con la solución limpiadora de la herida y permite que se seque al aire. No es necesario enjuagar. También puedes usar una esponja de gasa para ayudar a limpiar cualquier exceso de colágeno que aún quede en el área.




5 Aplicación del nuevo vendaje

Abre la bolsa de polvo de colágeno y aplícalo directamente en el área de la herida.

NOTA: Pellizca los lados de la bolsa para facilitar una aplicación más precisa en la herida. Espolvorea directamente sobre el área (aproximadamente una pulgada de grosor en la superficie), asegurándote de que no esté demasiado comprimido.

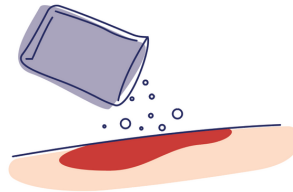

Es importante mantener un ambiente húmedo en la herida, por lo tanto, la solución limpiadora de la herida se puede rociar antes de cubrir la herida en el paso 7 y diariamente según sea necesario.

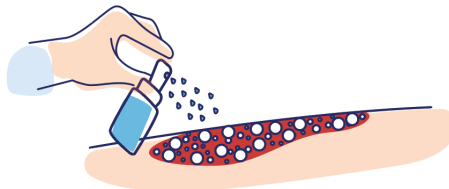


7 Cubrir y Proteger

Usa una esponja de gasa para limpiar suavemente el exceso de colágeno y humedad alrededor del área de la herida.



Cubre el área de la herida vestida con el apósito protector, alisando los bordes para asegurarlo en su lugar. El borde adhesivo no debe entrar en contacto con el área de la herida.

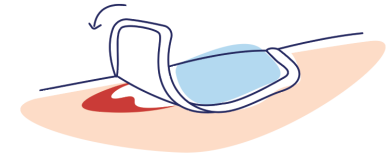

NOTA: Para garantizar un buen sellado, asegúrate de que el área alrededor de la herida esté seca. Si está húmeda o mojada, seca suavemente o limpia con gasa.

¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? Llama o envía un correo electrónico.

1-888-656-3444

help@mirodx.com

Los recursos se pueden encontrar en el sitio web:
mirodx.com/patientresources-collagenpowder/

